

LONDON

DERMALS

Aesthetics

Beauty Lasers

March, 2020

DERMALS

Aesthetics

Enhancing confidence ...

www.dermals.co.uk

contact@dermals.co.uk
+44 77 25 23 32 32

Kemp House, 160 City Road, London,
United Kingdom, EC1V 2NX



UK Professional Beauty Lasers

British Design under supervision of
Royal Medical Aesthetics Association

2020

Established in 2008, DERMALS AESTHETICS Ltd. is one of the leading UK, manufacture of professional advanced beauty equipments and medical devices.


We have our own Research & Development Department, Factory, International Sales Department, Overseas Distributors and After Sales Department.

The production is under ISO13485, ISO9001 quality system and match with CE certifica desire to have the pleasure of satisfying our distributors and clients with our high quality professional services.

DermAls Group- registered British Aesthetics Company, aiming to turn passion to excellence on all about Medical & Beauty. We are health - addicted, research - passionate, training - ignite. ...

NO.1 AESTHETIC CHANNEL, presenting everything you need in the field of cosmetology and medical aesthetic procedures and products, offering best and most reliable content, products and services...

ENHANCING LIFE
Through Technology

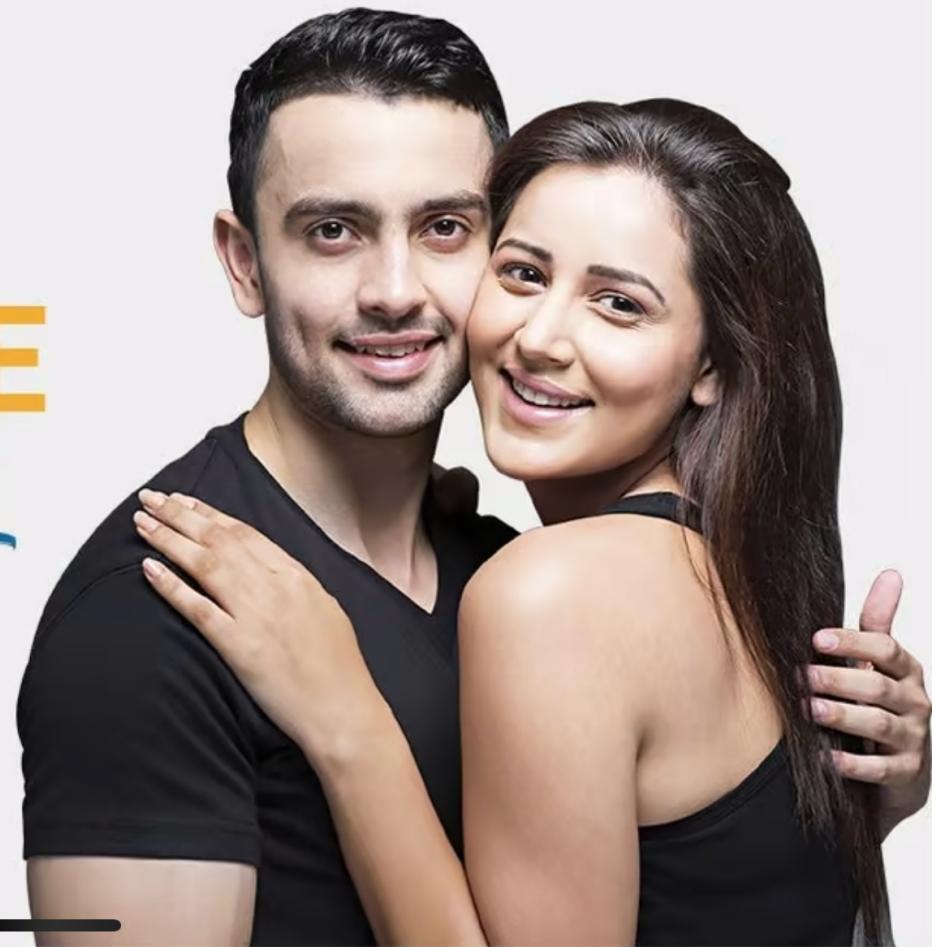

Beauty lasers

| 1

2020

DERMALS SKIN PRIME

UK PROFFESIONAL ADVANCED HIFU

DERMALS latest products (Radar Carving + 4D multi-row+Liposonic+Vaginal tightness +Detection) :
Skin Prime is a multi-row fixed-point + 360 °non dead corner+ custom point + 360 °3D surround technology.

SKIN PRIME



V MAX Ultra cartridge
4D HiFu cartridge
LIPOSONIC cartridge
VAGINAL cartridge
2200 W



DERMALS

Rezultatet qe mund te arrihen me Skin Prime jane:

- Stimulimi i kolagjenit dhe elastines
- Zvogëlimi i rrudhave.
- Shtrengimi i lekures se varur ne qafe.
- Ngritja e mollezave, vetullave.
- Pe'rmiresimi i perkufizimit tenofulles.
- Shtrengimi i dekoltes.
- Rigiditeti i lekures

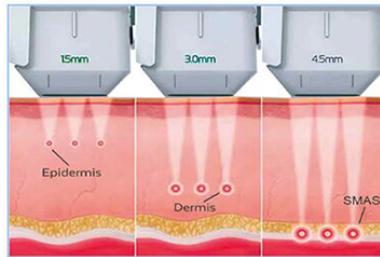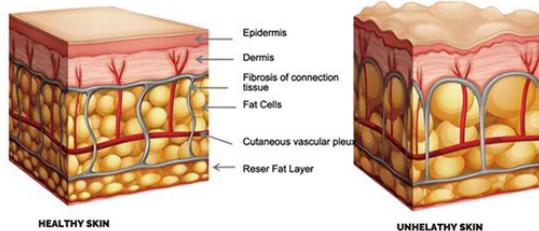

DERMALS Skin Prime perdoret per trajtimin e fytyres dhe trupit:
FYTYRA:

- Rrudhat e ballit
- Rrudhat rreth syve
- Molleza
- Nenmjejkrra,
- Qafa

TRUPI:

- Barkun
- Pjesen e brendshme te kofsheve
- Pjesen e jashtem te kofsheve
- Zonen e belit
- Pjesen e fundshpines
- Pjesen e brendshme te kraheve



Benefitet e Skin Prime ne trajtimin e trupit

- Shtrir rrudhat ne bark dhe palosjet dhjamore,
- Tonifikon (terheq) lekuren
- Rrit elasticitetin e lekures
- Permireson teksturen e lekures
- Shkaterron qelizat dhjamore (humbje ne diameter)
- Redukton celulitin
- Formeson dhe tonifikon lekuren

SKIN PRIME

V MAX Ultra cartridge
4D HiFu cartridge
LIPOSONIC cartridge
VAGINAL cartridge
2200 W




DERMALS

DERMALS Skin Prime perdoret ne trajtimet per fytyre dhe trup duke stimuluar prodhimin e kolagjenit, dhe elastines mungesa e te cileve eshte faktori kyq i plakjes.

HiFu nenkupeton ultratingull te fokusuar me frekuence te larte qe deperton deri ne shtresat e thella te lekures, fytyres dhe trupit, i cili ultratingull stimulon terheqjen e lekures dhe shtrirjen e rruhave si dhe humbjen e pjeseve dhjamore ne menyre te shpejte.

Teknologjia Vmax e zhvilluar dhe patentuar nga Dermals, lejon qe efektet pozitive te HiFu klasike te rriten me 10 here si rezultat i penetrimeve ne shtresat me te thella te lekures.

Vmax HiFu ka shume perfitime estetike, dhe perdoret per te kundervepruar me shenjat e plakjes si renia e lekures dhe rruhat ne fytyre, qafe dhe gjoks, si dhe heqjen e zones se ballit.

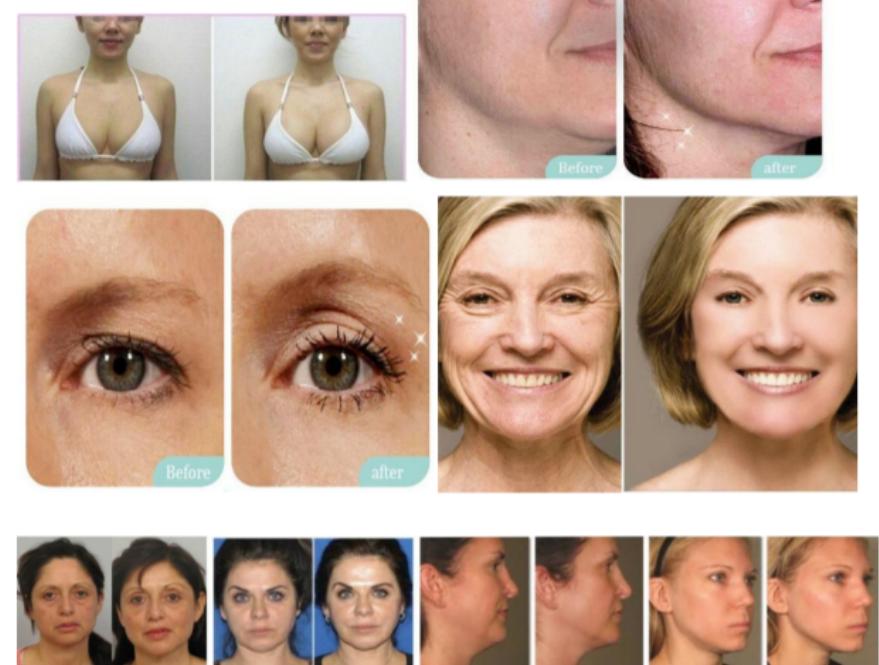

| 2



2020

DERMALS

Hydra Master

UK PROFFESIONAL SKIN CARE

9 in 1 Hydra Beauty Skin System
HydraMaster risia e fundit ne teknologjine e
kujdesit te lekures.

HYDRA MASTER

9 in 1
100-240VAC, 50Hz/60Hz
Vacuum: 100Kpa Max / 0 - 1 bar

DERMALS

1. Hydra Dermabrasion; Pastron thelle lekuren, heq pikat e zeba dhe te bardha, eshte e shkelqyeshme per te gjitha llojet e lekuvave, siguron rezultate te menjehershme.
2. Diamond Peeling; Heq shtresen e vdekur te lekures dhe papastertite (Exfoliate), permireson elasticitetin e lekures se fytyres, qafes, dekoltes etj.
3. BIO me mikro rryme; Shtrengimi i lekures, permiresimi i tenit se lekures,
4. Frekuencia e larte; Zbatohet per puçrra / akne dhe purifikim te hundes, zvogelon poret e zmadhuara, zvogelon rrudhat, rinovon lekuren.
5. Ultrasonik i fytyres dhe i syve; Ndihamon lekuren te thithe produktet e kujdesit, rrite efektet e trajtimeve me mesazh faciale dhe produkte profesionale per kujdes dhe trajtim te lekures.
6. Kullimi limfatik; Masazh limfatik, relaksion muskujt. Ndihamon ne eleminimin e rrudhave te e imta
7. Drite LED; Zbardhja e lekures dhe sterilizimi anti-inflamator.
8. Sperkatje oksigjeni; Spray profesional rrit thithjen e vajrave esenciale dhe oksigjenizon lekuren
9. Pastrues i lekures; Pastrim i thelle e lekures



9 FUNCTIONS

1. High Frequency
2. Hydra Light Facial
3. Diamond Peeling
4. Ultrasonic
5. Oxygen Sprayer
6. Lymphatic Drainage
7. BIO - Lift
8. PDT LED Light
9. Skin Scrubber

HYDRA MASTER


9 in 1
100-240VAC, 50Hz/60Hz
Vacuum: 100Kpa Max / 0 - 1 bar

DERMALS

Dermals HydraMaster- eshte menyra me e mire e trajtimit te: lekures se demtuar nga dielli, poreve te zgjeruara dhe te papastr, akneve dhe akneve nenlekurore, shenjave nga aknet, pikave te bardha dhe te zeza, shenjave te plakjes, pigmentit siperfaqesor

Dermals HydraMaster - pastron thellesht lekuren, aknet, pikat e zeza dhe papastertite tjera permes hidratimit; minimizon poret; permirson dukshem tenin e lekures dhe poreve, eleminon plotesish shtresen e lekures se vdekur

Dermals HydraMaster permirson qarkullimin e gjakut duke rezultuar perqendrim me te madh te oksigjenit ne kapilar keto jane parakusht per lekure te revitalizuar.

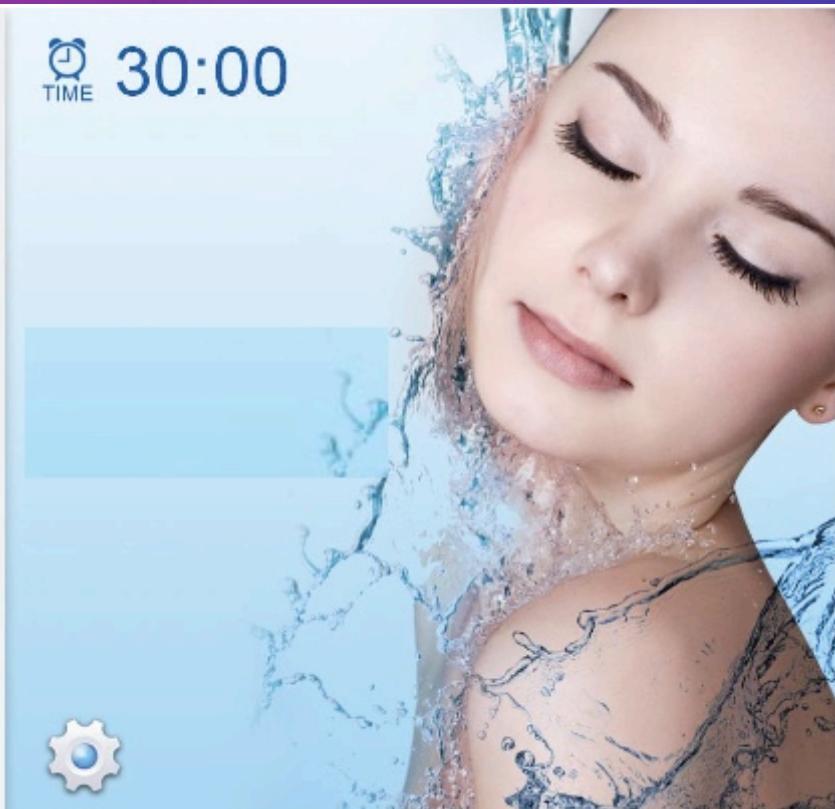

| 3



2020

DERMALS

Fraxel

UK PROFFESIONAL Co² Fraxel

CO2 Fractional Laser System

FRAXEL

10600 nm,
60 W medical,
Face/ body cartridge
Vaginal handle
220 V


DERMALS

Trajtimi me CO₂ Fraxel laser eshte nje procedure e sigurt, jo - invazive dhe sherben per te permiresuar siperfaqen e lekures pasi: zvoglon poret, eliminon njollat e erreta, redukon rrudhat rrith syve dhe cikatricet e akneve, rionon dhe rifreskon qafen, dekolten dhe duart.

Fraxel eshte i shkelyer per te rigjeneruar lekuren sepse nxit prodhimin natyral te kolagjenit dhe elastines ne dermis.

DERMALS FRAXEL Lazeri perdoret per:

- Trajtimin e rrudhave ne zonen anesore te syve
- Eleminimin e rrudhave fine ne te gjithe fytyren
- Trajtimin dhe eleminimin e akneve
- Rigjenerimin e lekures se fytyres, qafes, dekoltese, duarve etj.
- Trajtimin e cikatriceve dhe shenjave nga aknet
- Trajtimin e lekures se demtuar nga dielli
- Reduktimin e poreve
- Korrigjimin e njollave te lekures
- Eleminimin e strijave
- Eleminimin e shenjave te kafta te pleqerise
- Kozmetiken gjinekologjike (rigjenerim vaginal)

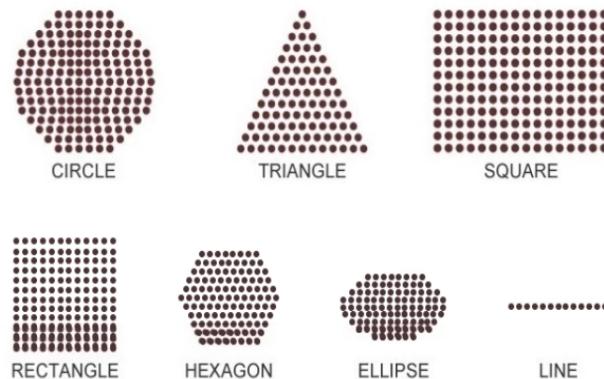

CO₂ Fractional Laser System



FRAXEL

10600 nm,
60 W medical,
Face/ body cartridge
Vaginal handle
220 V

DERMALS



Previous



7 Days



Previous



14 Days



Previous



23 Days



Previous



After



01.

Strija, eleminon shenjat nga:
operacioni djegja dhe aknet



02.

Rigjenerim si dhe rishtresim i
likures dhe permiresim nga
demtimet e diellit



03.

Eleminim i rrudhave dhe
shtrengim i likures



04.

Eleminim i pigmenteve
sikloasma interaktibile,
shenjat nga plakja,
piklat apo njollat



05.


Trajtimi i akneve



06.

Trajtimi vaginal, ngushtimi,
zbardhimi dhe optimalizimi

| 4

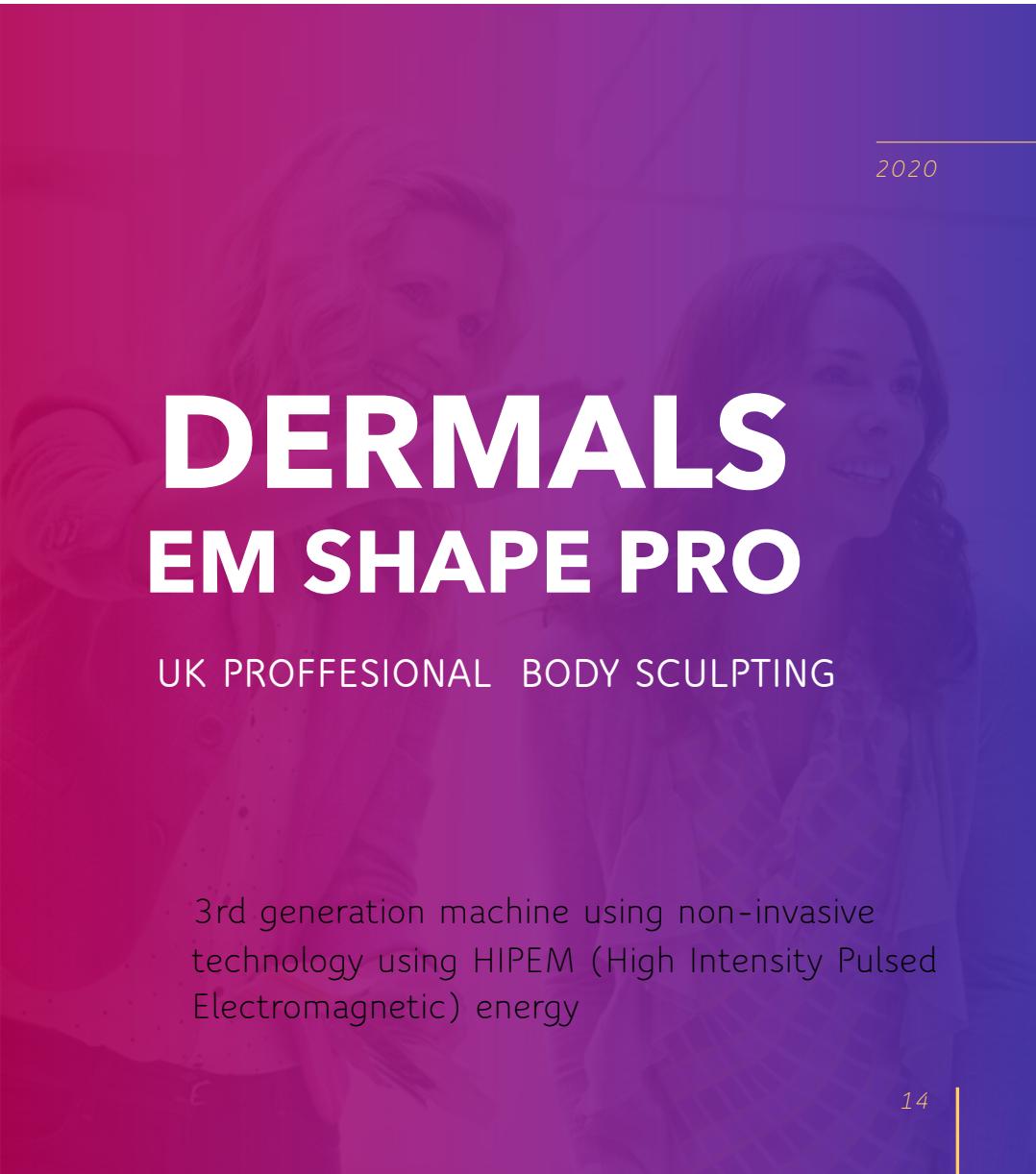A blurred background image showing two women smiling. One woman has blonde hair and is wearing a white top, while the other has dark hair and is wearing a patterned top.

2020

DERMALS EM SHAPE PRO

UK PROFFESIONAL BODY SCULPTING

3rd generation machine using non-invasive technology using HIPEM (High Intensity Pulsed Electromagnetic) energy

EM SHAPE PRO

2 koka
5 Programe speciale trajtimesh
20 000 squads 13.46 T (tesla)

DERMALS

EMSHAPE ; permes perdonimit te pulseve elektromagnetike behet formesim i muskujve dhe elemenimi i dhjemit.
Nje sesion eshte i barasvlefshem me 20 000 pompa.

Mesatarisht 19% redukton dhjimin.


16% ose me shume rritet masa muskulare.

Rritet per 5 here metabolizmi.

Zvogelim deri ne 4cm i belit

Ndarja muskulore ne abdomen reduktohet me 11%.

80% e pacienteve verejne efekte te dukshme ne liftingun e vitheve

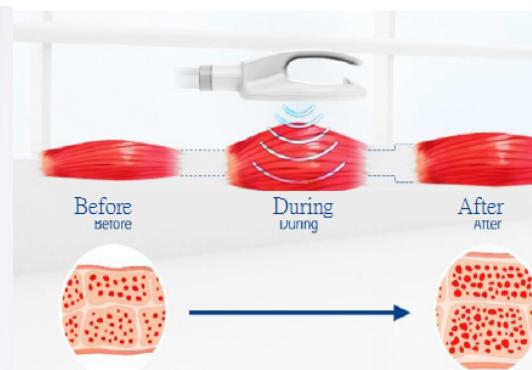

EM Shape Pro

2 koka
5 Programe speciale trajtimesh
20 000 squads 13.46 T (tesla)

DERMALS

Ndonese shumica e trajtimeve te tjera te trupit thjesht targetojne vetem shtresen dhjamore te padeshiruar, EM Shape Pro funksionon ne menyre unike duke targetuar si dhjimin ashtu edhe muskujt. Procesi funksionon duke emetuar energji elektromagnetike te perqendruar ne zonen e trajtuar, duke sforuar muskujt te kontraktohen ne nje menyre qe nuk eshte e mundur permes ushtrimiteve duke rezultuar me rritje te volumit te muskujve, forcimit te tyre si dhe eliminimin e grumbullimeve dhjamore.


Dermals EmShapePRO ka kater opsione:

HIIT - ushtron muskujt dhe redukton dhjimin.

Hypertropy - Stiimulon rrijen e mases muskulore.

Strength - Forcon muskujt pa rritur masen muskulore;
dhe kombinimin e opsiuneve.

Koha ideale qe ta shihni efektin eshte 4-6 javë pasi t'i keni mbaruar 4 sesionet.

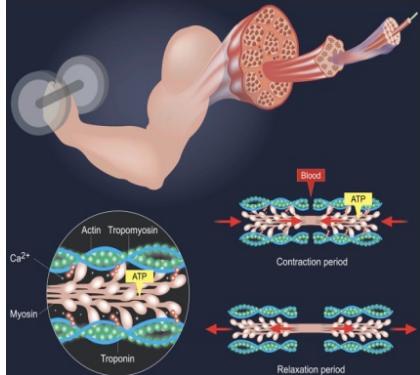

Abdomen



Gluts



Hamstring



Shoulder



Thighs

| 5



TERMINATOR

Laser power 4000Watts
Light guide performance increased by 25%.
Light uniformity increased by 20%.
Cooling effect increased by 30%.
Pulse mode : Auto, 30ms, 100ms, 200ms.
Adjustable 5-70JULcm²

DERMALS

Fale zhvillimeve teknologjike eleminimi i qimeve te padeshiruara nuk eshte me problem. Depilimi me laser eshte metoda me e suksesshme e eleminit te perhershem te qimeve kjo realizohet permes lasert intelligent i cili sipas tipit te lekures pas analizimit vepron ne gjatesi valore 755nm (alexandrite) 810nm (Gold standard) 1064Nm (YAG) te cilat gjatesi mundesojne eleminimin e perhershem te qimeve te fazes anagen ne te gjithe trupin ne te gjitha llojet e lekures.

DERMALS TERMINATOR Lazeri i vetem ne bote i cili kombinon perfitimet e 3 gjatesive te ndryshme valesh ne heqjen e qimeve, (755 Alexandrite, 808 Diode, 1064 YAg), me energji 4000 W ne nje aplikator te vetem.

ALEX 755 NM GJATESI VALORE; Alexandrite eshte ideal per nje spektrum te gjere te tipeve te qimeve por ka nje efektivitet superior ne krahasim me te tjere ndaj qimeve te zbehta dhe te holla.

DIODE 808 NM GJATESI VALORE; 808nm gjate si vale, eshte gjatesia klasike ne lazer per heqjen e qimeve, e cila ofron penetrime te thelle ne folikulin e qimes me fuqi mesatarisht te larte , dhe me zona te medha rreth 2 cm, qe e ben trajtimin e shpejte. 808 nm ka absorbim te moderuar te melanines, kjo e ben te sigurte ne lekura te erreta.

YAG 1064 NM GJATESI VALORE; YAG 1064 gjatesia valore karakterizohet nga absorbimi i ulet i melanine, ndaj eshte zgjidhja me e mire per lekura te erreta. Ne te nejtejt kohe, 1064nm, ofron pentrimin me te thelle ne folikulin e qimes, duke shenjestruar bulbin dhe papilen e qimes, ndaj eshte zgjidhja per qimet e mbeturat nen lekure ne zonat pubike, squetulla apo skalp.


Fazat e rritjes se qimeve:

- Anagen; ne kete faze qimet rriten vazhdimi, kjo faze zgjate disa javë (kryesisht 3-5) dhe perfshire deri ne 85% te qimeve.
- Catgen; faza regressive, zgjate dy-tri javë ku qimet nuk rriten me dhe pefshin rreth 3-4% e qimeve ne trup;
- Telogen, faza e pushimit, zgjate 5-6 javë dhe ne fund te saj, qimet bien dhe fillojnë te dalin te rejat.

#dermals TERMINATOR
New Generation Hair
Removal Laser Machine



TERMINATOR

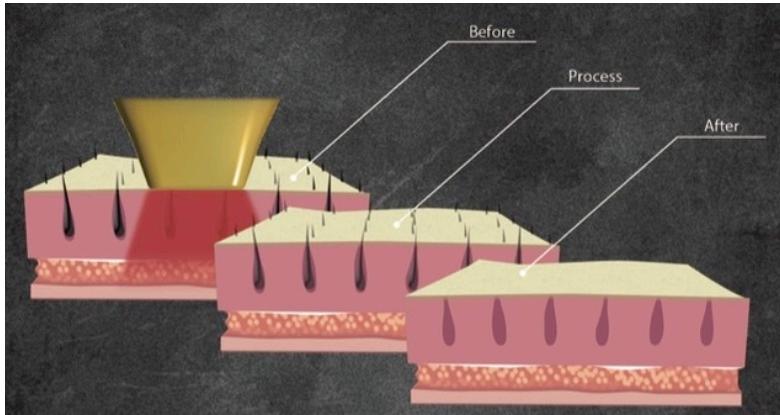

ICE COOLING



Laser power 4000Watts
Light guide performance increased by 25%.
Light uniformity increased by 20%.
Cooling effect increased by 30%.
Pulse mode : Auto, 30ms, 100ms, 200ms.
Adjustable 5-70JULcm2

DERMALS

TRIPLE WAVELENGTHS, BEST RESULT FOR ALL SKIN TYPES AND ALL HAIR TYPES

755nm

808nm

1064nm

755nm offers more powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for light colored and thin hair. It targets the Bulge of the hair follicle and is especially effective for superficially embedded.

808nm is classic wavelength in laser hair removal, the 808nm wavelength, offers deep penetration of the hair follicle with high average power,suitable for most skin types and hair types.

1064nm wavelength is characterized by lower melanin absorption, making it a focused solution for darker skin types. At the same time, the 1064nm offers the deepest penetration of the hair follicle.



DERMALS TERMINATOR ka te inkorporuar sistemin SHR, i cili mundeson heqjen perfundimtare te qimeve ne menyre komode dhe te sigurte. Ne vend te eksposimit te folikulit te qimes nga nje shkarkim i vetem energjie, i cili mund te demtoje lekuren, SHR funksionon duke ngrohur gradualisht dermen, deri ne temperaturen qe efektivisht te shkaterroje folikulin e qimes dhe te pengoje ridaljen e saj, duke evitar qdo lloji demtimi te indeve perreth.

| 6



2020

DERMALS TERMINATOR XL

UK PROFFESIONAL DIODE HAIR REMOVING

High Power Triple Wavelength 755nm,
810nm, 1064nm, Permanent Diode Laser Hair
Removal Machine

20

TERMINATOR XL

TRIPLE WAVE LENGTHS

Laser power 3500Watts

Light guide performance increased by 25%.

Light uniformity increased by 20%.

Cooling effect increased by 30%..

Adjustable 5-70JUL/cm²

DERMALS

DERMALS TERMINATOR XL, diod Lazeri me 3 gjatesi valore (755 Alexandrite, 808 Diode, 1064 YAg), me energji 3500 W ne nje aplikator te vetem.

ALEX 755 NM GJATESI VALORE; Alexandrite eshte ideal per nje spektrum te gjere te tipeve te qimeve por ka nje efektivitet superior ne krasim me te tjere ndaj qimeve te zbehta dhe te holla.

DIODE 808 NM GJATESI VALORE; 808nm gjate si vale, eshte gjatesia klasike ne lazer per heqjen e qimeve, e cila ofron penetrim te thelle ne folikulin e qimes me fuqi mesatarisht te larte , dhe me zona te medha rreth 2 cm, qe e ben trajimin e shpejte. 808 nm ka absorbim te moderuar te melanines, kjo e ben te sigurte ne lekura te erreta.

YAG 1064 NM GJATESI VALORE; YAG 1064 gjatesia valore karakterizohet nga absorbimi i ulet I melanine, ndaj eshte zgjidhja me e mire per lekura te erreta. Ne te njeften kohe, 1064nm, ofron pentrimin me te thelle ne folikulin e qimes, duke shenjestruar bulbin dhe papilen e qimes, ndaj eshte zgjidhja per qimet e mbeturat nen lekure ne zonat pubike, sqetulla apo skalp.

Rezultati i pote ne vetem 3-5 seanca.



**Laser Hair Removal
for all skin types!**

UK Professional Diod Hair Removal

LASER HAIR REMOVAL

- ✓ EFFECTIVE
- ✓ PAINLESS
- ✓ EFFICIENT
- ✓ FAST



Diode Laser Hair Removal Machine

808nm+755nm+1064nm



TERMINATOR XL

DERMALS

TRIPLE WAVE LENGTHS

Laser power 3500Watts

Light guide performance increased by 25%.

Light uniformity increased by 20%.

Cooling effect increased by 30%..

Adjustable 5-70JUL/cm²

- ✓ Per te gjitha llojet e lekures.
- ✓ Koha me e shkurter e trajimit
- ✓ Pergjate 12 muajve te vitit.
- ✓ Ne lekure te nxire me solar.
- ✓ Komfort maksimal.





TERMINATOR XL eshte paisje e teknologjise se fundit duker perdor 10 laser bar Gjerman, dhe kristale safari Amerikan per efikasitet maksimal.

Trajtimi me Terminator XL eshte pa dhimbje dhe nuk ka rrezik per djegie.

Ka sistem special ftohes, i cili mbron lekuren nga djegia, per te arritur keshtu nje trajtim efikas, te sigurt dhe komod.

Dermals Terminator XL ka avantazhin eksluziv qe mund te perdoret edhe tek personat me lekure te erret apo gjate periudhes se veres kur lekura eshte e nxire nga Dielli, apo me Solar.

Dermals Terminator XL realizon trajtimin e plete te trupit per kohen me te shkurter vetem 40 minuta, me efikasitet maksimal

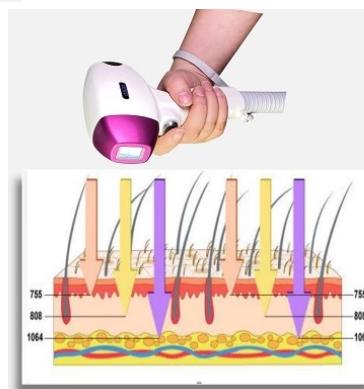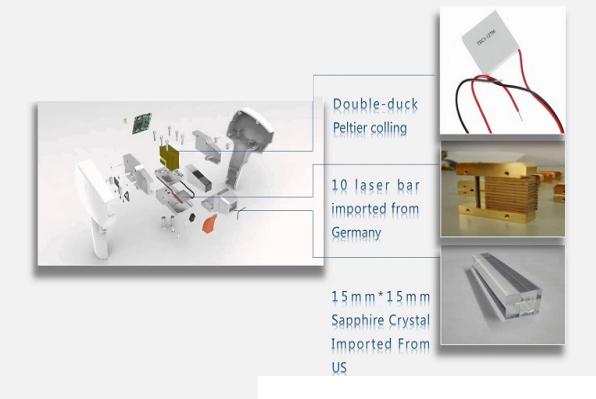

Function

Color

1. (I) Northern, European, British

2 (II) European, Scandinavian


3 (III) South European, Central European

4 (IV) Mediterranean, Asian, Latino

5 (V) East Indian, African, Native American

6 (VI) African, Aboriginal

Area

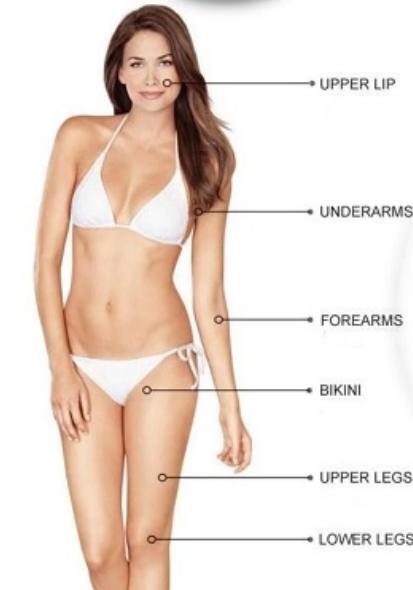

| 7

2020

DERMALS TATTOO REMOVAL

UK PROFFESIONAL PICOSECOND

Picosecond Tattoo Removal & Carbon Peel

23

TATTOO REMOVAL

2000mJ, 10Hz

4 gjatesi valore: 532 nm, 1064nm, 755nm, 1320nm

Short pulse

DERMALS

DERMALS TATTOO REMOVAL gjithashtu edhe per Karbon Peeling; teknika me profesionale e trajtimit te lekures, rigjenerimit dhe zbardhimit, elemenimit te pikave te zeza dhe shenjave nga aknet dhe trajtimin e vet akneve si dhe poreve te zgjeruara.

Karakteristika:

- Heqja me lazer behet ne menyre te fragmentizuar duke e larguar ate pjese pjese me nje distance kohore prej 4-6 javë nga njera seance te tjetra pasi kjo eshte koha qe i duhet lekures per tu rigjeneruar dhe per tu rigiditut perseri.
- Pigmentet e tattoo-se kane nje spekter specifik te perthithjes pasi energjia qe emeton lazeri percaktohet nga filtri qe i vendoset ne momentin qe do te goditet.
- Disa pigmente si e verdha, jeshilja, e kuaja dhe e bardha si dhe ato fluoreshente, jane me te veshtira per tu trajtuar krasuar me te zezen apo ngjyrat e erretat.
- Per te bere nje heqje te tatuazhit, duhen disa seanca, numri i seancave varet nga madhesia e zones qe do trajtohet, lloji i bojes se perdorur per tattoo-n si dhe karakteristikat e lekures. Prandaj koha e heqjes se tattoo-se varet nga njeri person tek tjetri.
- Heqja e tattoo-ve nuk eshte nje proces i kendshem, madje shume paciente thone qe dhemb po aq sa vete berja e tattoo-se, por kur patienti nuk e duron dhimbjen, perdoren kremera anestetike.
- Tatuazhet kryesish realizohen me ane te makines elektrike e cila me shpejteti te madhe me ane te gjilperes ne menyre te perseitur, vendos bojen ne shtresen e lekures duke e 'prere' shtresen e siperme te lekures. Ne te vertete, me sa me shume perkujdesje dhe qetesë te jete realizuar tatuazi aq me e thjeshte eshte qe te hijet ne te ardhmen pasi pigmenti eshte i vendosur i gjithi ne te njejten thellesi ne lekure.



TATTOO REMOVAL

2000mJ, 10Hz

4 gjatesi valore: 532 nm, 1064nm, 755nm, 1320nm

Short pulse

DERMALS

Gjatesia valore 532 nm perdoret per eleminimin e pigmenteve dhe shenjave ne epiderm: eleminimin e tattoo me gjyre te kuqe, kafe, verdhe.

Gjatesia valore 1064nm perdoret per eleminimin e pikmenteve ne derme si tattoo me ngjyra te erreta: te zesa dhe kafe te mbyllta.

Gjatesia valore 755nm eleminimin e pigmenteve ne epiderme, tatto me ngjyra te errta.

Gjatesia valore 1320nm (Carbon Peel) perdoret per eleminimin e shenjave dhe poreve te zgjeruara, eleminimin e pikave te zesa, zbardhimin dhe rigjenerimin e lekures.

Karakteristike e gjatesise valore 1320nm eshte se handle (mbajtesit) eshte inteligjent pra ben identifikimin vet te problemit ne lekure, psh. nese ka nevoj per trajtimin e poreve apo ka nevoje per trajtimin e akneve apo lekura te rigjenrerohet, laseri ne menyre inteligjente bene videntifikimin e problemimit dhe vepron perkitazi me probleminit, e gjitha cka duhet bere eshte vendosja e mbajtesit, pjesen tjeter e bene vet laseri.



Sunburn
Djegjive te diellit



Pocked scar
Piklav




Freckles
Pigmentev



Birthmark
Shenjave te lindura

Tattoo
Tattoo

| 8

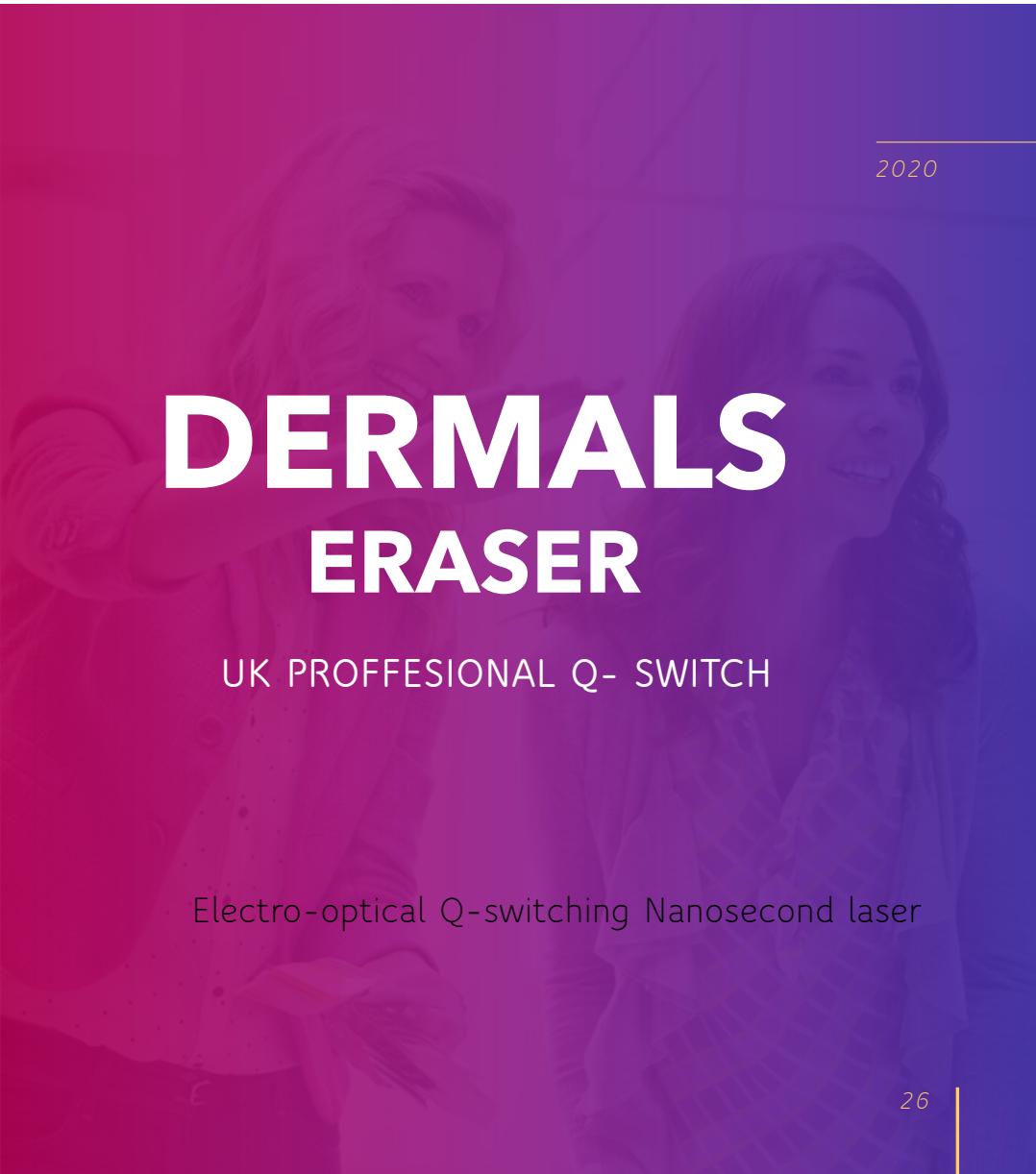

2020

DERMALS ERASER

UK PROFFESIONAL Q- SWITCH

Electro-optical Q-switching Nanosecond laser

ERASER

Single pulse : 1064nm-600mj; 532nm-300mj
Double pulse : 1064nm-1200mj; 532nm-400mj
Long pulse : 1064nm-2000mj
1500 Watts


DERMALS

Q-switched Nd: YAG LASER deperton ne ngjyren e tattoo-se duke e shkateruar ate nepermjet fototermolisis. Me pas ngjyra asimilohet nga trupi yne dhe tattoo-ja merr pamjen e venitjes nga dielli. Ky model laseri perdor dy gjatesi vale: 1064nm - per ngjyren e zeze dhe blu si dhe : 532nm- per ngjyren e kuqe, portokall dhe pink. Seancat e trajtimeve varen nga lloji i tattoo-ve (amatore, profesionale, aksidentale, etj); koha e berjes se saj; ngjyrat; tipi i lekures. Koha ndermjet seancave eshte 4-6 javë.

ERASER eshte mjaft efektiv ne heqjen, njollave kafe te moshes, njollave te kuqe te lindura.

Dermals ERASER shkurton seancat e heqjes se tatuazheve dhe pigmenteve nga 5-10 here ne 2-4 here, zvogelon kohen e trajtimit dhe sherimit.

Mund te heq te gjitha llojet e pigmenteve dhe tatuazheve ne menyre efektive dhe te sigurt, sepse q-switch lazer perdon pozicionimin e sakte te terapise se synuar te indeve per te zvogeluar demtimin e lekures per te arritur efektin e njoles.

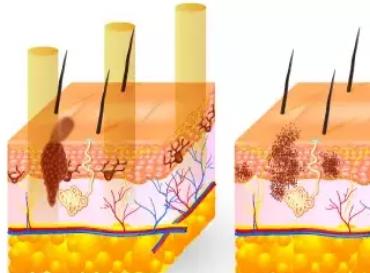

ERASER

DERMALS

Single pulse : 1064nm-600mj; 532nm-300mj
Double pulse : 1064nm-1200mj; 532nm-400mj
Long pulse : 1064nm-2000mj
1500 Watts

Perdorimi:

1. Shperndarjen e depozitaitave pigmentare
2. Rinovimi i lekures
3. Heqja e tatuazhit: Heqjen e tatuazheve ngjyre kafe, te zeze, blu dhe shumengjyreshe (te tilla si jeshile e kuqe e verdhe), heqjen e tatuazheve semi-permanente ne buze, liner, vetullave tattoo
4. Eliminon pikat e pigmenteve te moshes shenjat e lindjes dhe ndryshimet e pigmenteve
5. Carbon peeling ose Peeling Hollywood-ian qe nuk le shenja

Before and after comparison



Before After



Before After



Before After



Before After



01.

All color tattoo,eyeline and lipline removal



02.

Epidermis and dermis pigment



02.

Epidermis and dermis pigment



04.

Senile plaques, freckle,sunburn spot and chloasma



05.

Skin whitening and wrinkle removal, rejuvenation, etc

| 9

A blurred background image showing two women smiling. One woman has blonde hair and is wearing a light-colored top, while the other has dark hair and is wearing a patterned top.

2020

DERMALS FAT FREEZING

UK PROFFESIONAL CRYOLIPOLYSIS

the breakdownER of triglycerides into free fatty acids within cells.

FAT FREEZING

Ultrasonic Frequency 40.5KHz + 28KHz



Ultrasonic Power 1-50W/CM²

Vacuum Pressure 1Mpa

Kriolipoliza (Cryolipoliza) eshte nje procedure e thjeshte, jo-invazive, e cila bazohet ne nje ftohje te gjate, te shtreses se yndyre ne zonat problematike. Qelizat yndyrore te trupit tone jane shume te ndjeshem ndaj temperaturave te uleta, nen veprimin e te cilave ata jane shkatterruar natyrshem. Nje vdekje e tille nuk eshte e rrezikshme per trupin, per shkak se indet perreth nuk vuajne, nuk ndodhin reagime inflamatore dhe produktet e dekompozimit te yndyrave nuk e ndotin gjakun dhe sistemin limfatik. Keshtu, procedura cryolipolysis eshte nje alternative e sigurt per liposuction - nje metode ne te cilen yndyra eshte thithur permes punctures lekures ne trup.

Ku aplikohet DERMALS FAT FREEZER?

- Ne zonen abdomen (ne bark);
- Ne zonen e ijeve (perreth belit);
- Ne krahe;
- Ne kofshet e brendshme dhe te jashtme.

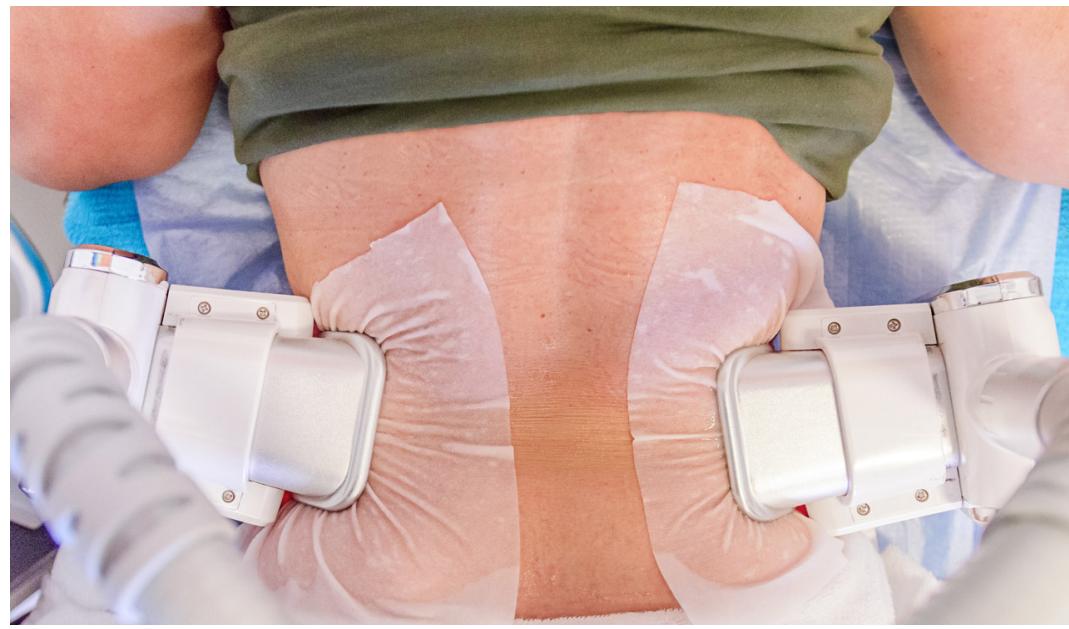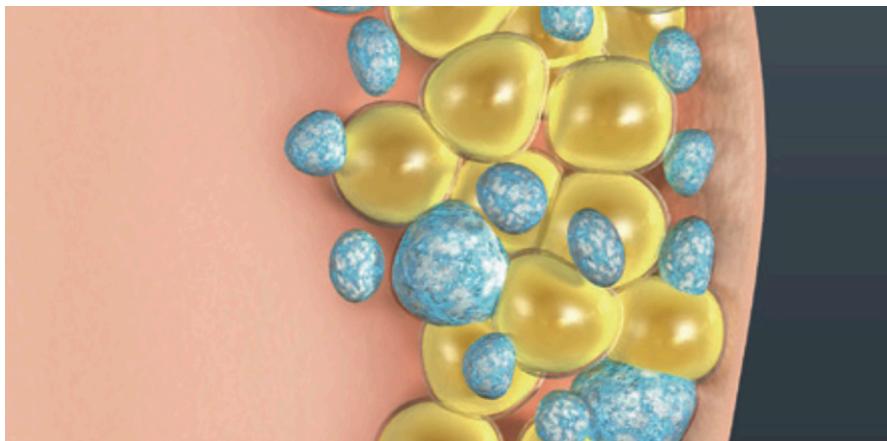

FAT FREEZING

Ultrasonic Frequency 40.5KHz + 28KHz
Ultrasonic Power 1-50W/CM²
Vacuum Pressure 1Mpa

DERMALS

DERMALS FAT FREEZING (Kriolipoliza) eshte nje aparat e cila aplikon temperature te ftohte ne zona ku kemi dhjam te shtuar per te cilen nuk jemi aspak te kenaqur dhe deshirojme ta eliminojme. Nepermjet DERMALS FAT FREEZING realizohet ftohje jo-invaziv e indit dhjamor qe sherben per te nxitur lipolysis (shperberjen e qelizave dhjamore) pa demtuar indet e tjera. Rezultati i trajtimit eshte i dukshem pas 2 deri ne 4 muaj nga trajtimi, ku ju do te vini re reduktim te dhjamit ne ate zone. DERMALS FAT FREEZING si dhe tonifikimin e lekures ne ate zone. Eliminimi i dhjamit pa kirurgji, pra FatFreezing, eshte veçanerisht i prefereuar nga ata persona te cilet nuk deshirojne te kryejne liposucion ne trupin e tyre.



| 10



2020

DERMALS VELASLIM

UK PROFFESIONAL CONTURING

Combination of 6 technologies: vacuum, radio frequency, Infrared light, 635nm diode laser, dual frequency(40.5KHz+28KHz) cavitation and mechanical roller.

VELASLIM

DERMALS

RF frequency 20MHz CRF
Infrared 940nm
Vacuum pressure
Absolute pressure: 10kPa–80kPa (7.6cmHg--60.8cmHg)
Relative pressure: 20kPa–90kPa (15.2cmHg--68.4cmHg)
Cavitation 40.5KHz+28KHz

TEKNOLOGIJA ME E AVANSUAR BOTERORE PER DOBESIM ,FORMESIM TE TRUPIT , ZHDUKJE TE CELULITIT

Celuliti eshte armiku i te gjitha femrave dhe mund te shfaqet ne çdo faze te jetes, gje qe e ben çeshtjen e paparashikueshme te bukurise edhe me shume se nje problem.

- ✓ Rimodelimi i trupit
- ✓ Dobesimi lokal
- ✓ Formeson pjesen e trajtuar
- ✓ Heq toksinat nga trupi
- ✓ Trajtime me koken speciale per ftyre dhe qafe.

VelaSlim perdor RF frequency 20MHz CRF - me e fuqishme ne treg e cila kombinuar me energjine Infrared 940nm bejne tonifikimin e lekures plotesisht.

Fale forces se presionit te vakumit arrihet penetrimi ne shtresat dhjamore te cilat presohen me fuqi 10kPa–80kPa (7.6cmHg--60.8cmHg)

Dhe Kavitation 40.5KHz+28KHz duke rezultuar me eleminim te shtreses dhjamore maksimalisht.



Face



Neck



Arms



Waist



Thigh



Back

VELASLIM

RF frequency 20MHz CRF
 Infrared 940nm
 Vacuum pressure
 Absolute pressure: 10kPa–80kPa (7.6cmHg–60.8cmHg)
 Relative pressure: 20kPa–90kPa (15.2cmHg–68.4cmHg)
 Cavitation 40.5KHz+28KHz



| 11



2020

DERMALS GOLD RF

UK PROFFESIONAL RF NEEDLE

Gold RF Micro-crystal

GOLD RF

RF Frequency 2MHz-4MHz
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

GOLD RF NEEDLE - kombinon Radiofrekuencen e fraksionuar me Microneedling duke bere nje tendosje te menjehershme te indeve dhe rimodelim dhe riparim te indeve subdermale.

Microneedling Radiofrequency ben te mundur:

- 👉 Eleminimin e strijave
- 👉 Eleminimin e rrudhave
- 👉 Eleminimin e çekatriçeve
- 👉 Tendosjen e lekures
- 👉 Tonifikimin e qafes, ftyres dhe dekoltese..


Makineria perdoret per ftyren dhe trupin




GOLD RF

RF Frequency 2MHz-4MHz
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

DERMALS

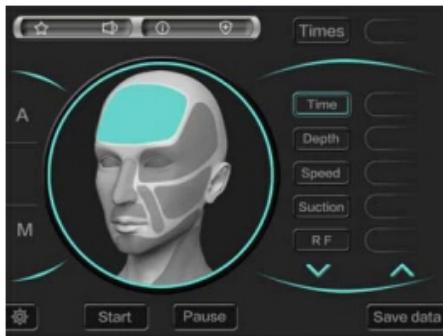

A facial operating interface

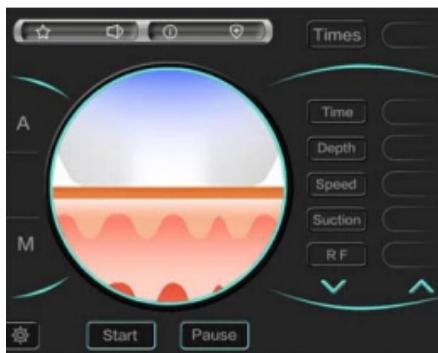

M belly operation interface



| 12

2020

SWEeper

3 in1 Infrared Pressotherapy EMS
slimming machine

SWEeper

RF Frequency 2MHz-4MHz
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

DERMALS

Presoterapia perdoret ne abdomen per 30 minuta, energjia e arritur ne kete kohe trajtimi eshte e barabart me 150 ushtrime te barkoreve.

Sweeper presoterapia ndikon ne ngritjen e qarkullimit te brendshem permes dhomezave te ajrit te cilat vendosen ne zonen e belit, pemes tkurrjes dhe zgjerimit ne menyre qe te thithin toksinat dhe ti nxjerrin jasht trupit, duke ndikuar direct ne ujen e shtreses dhjamore.

Pajisja ndikon ne qarkullimin e linfes, ndjerr jasht tepricen, per dallim nga vigratoret Sweeper bene pershtatjen e presionit te ajrit ne menyre qe te beje rialokimin e yndyres.

Valet e ajrit jane te buta dhe nuk demtojne klientin, perkundrazi ndikon ne relaksimin e klientit. Presioni ne nje dhomez te presoterapise eshte 200000 Pa.



SWEeper

RF Frequency 2MHz-4MHz
Needle Cartridges 10pin,25pin,64pin and nano chip

DERMALS

Shperberja e dhjamat.

Tufa infrared vepron ne masen dhjamore duke shperbere ate, permes radiacionit te nxehtesise. Ne kete menyre sasia e qelizave yndyrore reduktohet ndieshem.

Rrjdha regulare dhe deflacioni (renia) e presionit te ajrit rezultojne me tkurrjen dhe shperberjen e qelizave yndyrore.

Eleminimi i dhjamat.

Tufat infrared rezultojne me emetimin e nje sasie te madhe te energjise se nxehtesise, rrit qarkullimin e gjakut dhe reaksioneve biokimike, stimulon metabolizmin, me cka rezulton ne eleminimin e qelizave dhjamore.

Tkurrjen e sasise dhjamore

Rezatimi me nxehtesi ngrit temperaturen ne zonen e trajtuar keshtu behet zgjerimi i poreve, me cka rezulton ne djersitje me te madhe me cka sasia e ujit ne indin dhjamore futet ne qarkullimin e gjakut duke rezultuar me renien e volumit te qelizave dhjamore.

Ekstraktimi (nxjerra) i toksinave limfatike

Me arrijen e zgjerimit te poreve, rritjes se qarkullimit te gjakut, simulimin e metabolizmit dhe futjen e qelizave yndyrore te shperbera ne gjak dhe limf atehere dhomezat e ajrit, permes presionit te ajrit duke krijuar refluksje limfatike te cilat bejne nxjerrjen jasht trupit te toksinave, veprim ky qe ndikon drejpersedrejti ne eleminimin e sasive dhjamore ne trup.

Lehtesimi i spasmes (kontraksioneve) muskulore

Rezatimi i tufave infrared ndikojne ne uljen e tensionit te muskujve skeletor duke rezultuar ne rritjen kontraksioneve muskulore, cka bene mundesimin e dukjes ideale muskulore te klientit.



| 13



2020

SUNROOM solarium

UK PROFFESIONAL TAN & COLLAGEN

SUNROOM

52 LAMPS OF 225W Vertikal

Solarium eshte nje pajisje e cila prodhojne rreze ultraviolet (95% UVA dhe 5% UVB) per te prodhuar nje nxirje kozmetike.

SunRoom eshte i dizajnuar me standard te Bashkimit European sipas direktivave te Shoqates Europeane te Dermatologeve duke ofruar rrezitje (tan) pa asnje rrezik per lekuren dhe njekohesht stimulon kolagjenin.

SunRoom V ka:


- Sistem Inteligent te kontrollit
- Rrezitje sipas tipit te lekures
- Vitamin D
- Efekti kunder rudhave me llampa te Kolagjenit
- Klimatizim

SUNROOM Solari me fuqine me te madhe 11 700Watts; ka 52 llampa me fuqi 225W, me dedikim special per tan dhe stimulim te kolagjenit dhe elastines



SUNROOM

52 LAMPS OF 225W Vertikal

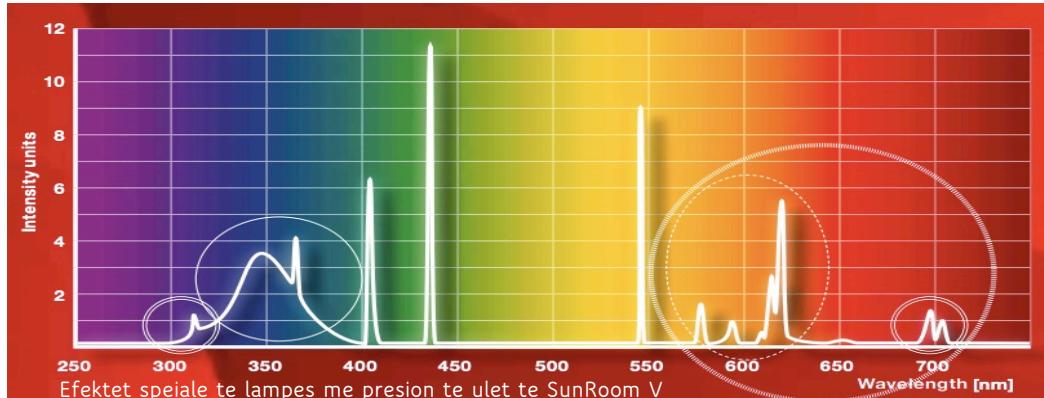

Spektri intenziv i kuq me distribuim te balansuar i llampave te SunRoom V ofron rezultate perfekte te tan, duke rritur pigmentimin direkt me 50%.

SunRoom :

- Permireson thelbesor te te pigmetimit direkt (tan).
- Procesin tani te pa demshem
- Tan me qendrueshmeri shume me te madhe.
- Rrit komaktivitetin e UV
- Mbron qelizat nga radikalet e lire
- Rrit furnizimin me oksigen te lekures
- Stimulon metabolizimin e lekures.
- Zbut dhe rifreskon lekuren.

SUNROOM:

- ✓ Rrit deri ne 50% pigmentimin (tanin) direkt te lekures
- ✓ Tan me i bukur dhe me qedrushemri shume me te madhe.
- ✓ Mbron lekuren nga radikalet e lire.
 - Zero rrezikim nga kanceri i lekures





Cka perfiton nga bashkepunimi me DERMALS?

- Trajnim dhe certifikim i njohur nderkombetarisht – Certifikimi behet nga Akademia jone e licencuar ne Angli.
- Support ne zhvillimin e aktiviteve biznesore, pakove te produkteve dhe sherbimeve per klient.
- Promocion ne rrjete sociale dhe portale.
- Te gjitha pajisjet vien me 2 vite garacion te pote, perpos demtimeve fizike.
- Per te gjithe periudhen e garacionit ne ju ofrojme suport direkt gjate trajtimeve qe beni ne klient.

DERMALS

Aesthetics



Life time parnerity

DERMALS

Aesthetics

DERMALS aesthetics

Professional Beauty Machines